

Mikroprúdová žehlička na vrásky
Cougar Massager

Facelifting tváre

Návod na použitie



Úvod

Ďakujeme vám za kúpu žehličky Cougar. Pozorne si prečítajte návod na jej používanie. Zariadenie účinne čistí zanesené póry pôsobením cez bazilárnu membránu, zlepšuje metabolizmus pokožky a jej schopnosť absorbovať krémy či séra, čím umožňuje blahodarným látkam dostať sa hlbšie do pokožky. To všetko vďaka mikroprúdovej technológii a pôsobeniu negatívnych iónov.

Výborne vyhladzuje jemné vrásky okolo očí, či úst, ale aj hlbšie vrásky na tvári. Podľa štatistík sa za bežných okolností vstrebáva do pokožky len približne 15 % blahodarných látok z krémov ak sa aplikujú vmasírovaním rukou. Pri použití mikroprúdovej žehličky Cougar Massager sa toto číslo zvyšuje až na 60 %.

Hlavné benefity žehličky Cougar Massager


- ★ vyhladzuje vrásky
- ★ eliminuje výskyt vrások a tmavých kruhov okolo očí
- ★ posilňuje odolnosť buniek pokožky
- ★ masíruje pokožku a zároveň zvyšuje absorpciu živín z krémov do pokožky
- ★ vypína pleť a čistí póry, lieči akné
- ★ odstraňuje dvojité bradu a zvýrazňuje kontúry tváre
- ★ stimuluje tvorbu kolagénu
- ★ zvyšuje elasticitu pokožky
- ★ detoxikuje lymfatický systém
- ★ poskytuje hĺbkové čistenie pokožky
- ★ urýchľuje metabolizmus buniek vo vnútri pokožky
- ★ podporuje krvný obeh, posilňuje a zjemňuje tkanivové vlákna
- ★ odstraňuje pigmentové škvrny a iné farebné nedokonalosti pokožky
- ★ odstraňuje čierne bodky
- ★ redukuje opuchy okolo očí

Funkcie žehličky Cougar Massager

Žehlička má 2 módy poskytujúce dva druhy ošetroení pleti. Hlavným účelom oboch typov ošetroení je zbaviť pleť vrások. Tieto ošetroenia však poskytujú aj množstvo ďalších pozitívnych prínosov pre pokožku čiastočne vymenovaných na predošlej strane tejto brožúrky.


1. Mikroprúdové ošetroenie

Mikroprúd je účinnejší ako galvanický prúd a výsledky sú pri tejto terapii omnoho kvalitnejšie. Mikroprúdová žehlička Cougar sa môže použiť nielen na tvár, ale aj na pokožku tela, hlavne krk a stehná, keďže okrem redukcie vrások dokáže aj vypínať pleť, zlepšovať jej elasticitu, odolnosť a prinavraciati jej mladistvý vzhľad. Na stehnách pomáha redukovať celulitídu.

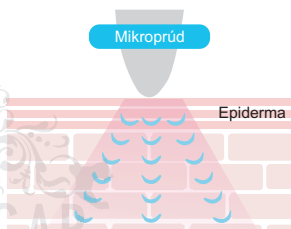


2. Galvanická terapia

Galvanický prúd omladzuje pleť a zároveň pomáha používaným krémom a séram lepšie sa vstrebávať hlboko do pokožky. Kombinácia pozitívnych a negatívnych iónov vedie k zlepšeniu mikrocirkulácie, urýchľuje metabolizmus pokožky, čo vedie k rýchlejšej obnove aktivity buniek, odbúravaní a prevencii vrások. Pokožka bude opäť pružná a navráti sa jej mladistvý vzhľad.

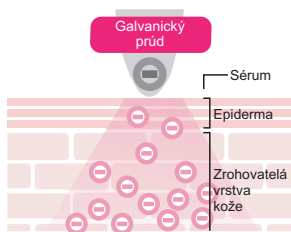


Popis žehličky

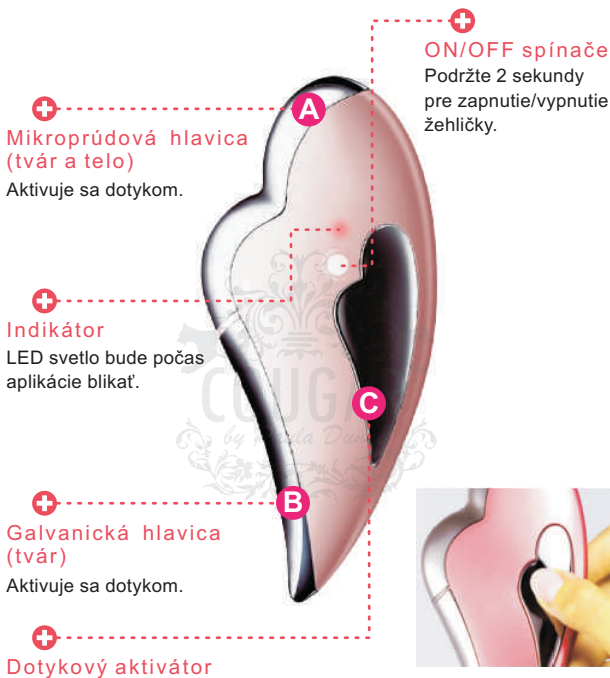

Na tomto mieste držte palcom žehličku. Pri súčasnom dotyku pokožky s jednou z hlavic žehličky sa prúd aktivuje. Pri masnejšej pleti použite na aktiváciu prúdu aj jeden z prstov, ktorým sa dotýkajte jednej z hlavic, ktorú chcete práve použiť. Pre lepšiu vodivosť si navlhčite palec, ktorým sa dotýkate aktivátora (C). Použite na to vlhkú utierku alebo sérum.

Návod na použitie

Najprv do žehličky vložte batériu.

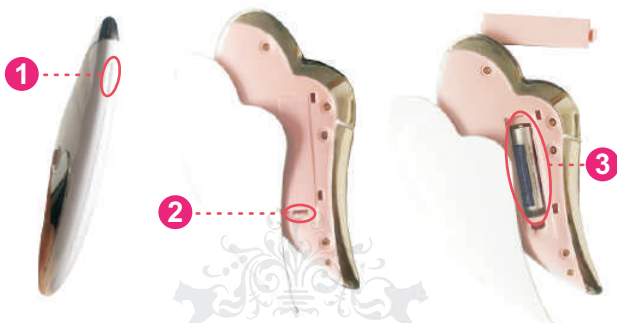

1. Otvorte kryt žehličky potiahnutím krytu nechtom smerom od žehličky.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Vložte jednu batériu typu AAA.

Po následnom vrátení krytu batérie, aj krytu žehličky je zariadenie pripravené na použitie.

- Podržte tlačidlo ON/OFF po dobu 2-3 sekúnd kým sa LED svetielko nezapne. Žehlička sa vypína automaticky ak nie je používaná dlhšie ako 10 minút.
- Po vyčistení pokožky aplikujte na ošetrovanú pleť krém alebo sérum. Umiestnite palec na dotykový aktivátor (C).
- Mikroprúdové ošetrovanie – umiestnite mikroprúdovú hlavicu žehličky (A) na pokožku a prúd sa aktivuje. Pri masťnejšej pleti použite na aktiváciu prúdu aj jeden z prstov, ktorým sa držaním žehličky dotýkajte mikroprúdovej hlavice. Svetiť bude modrá dióda a žehlička bude jemne vibrovať.
- Galvanické ošetrovanie – umiestnite galvanickú hlavicu žehličky (B) na pokožku a prúd sa aktivuje. Pri masťnejšej pleti použite na aktiváciu prúdu aj jeden z prstov, ktorým sa držaním žehličky dotýkajte mikroprúdovej hlavice. Svetiť bude červená dióda a žehlička bude jemne vibrovať.


Manuál ošetrení

Pred použitím žehličky si vyčistite pleť a aplikujte krém alebo sérum. Na pokožku líc je ideálne aplikovať aj dve vrstvy séra.

Pre ideálne výsledky opakujte ošetrovanie **2-3-krát za týždeň**.

Líca a kontúry tváre

Krok 1

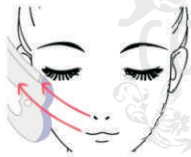

3-krát prejdite mikroprúdovou
hlavicou po lícach od brady a
úst smerom k spodnej
časti ucha.
Každé ošetrovanie opakujte
na oboch stranách tváre.

Krok 2



Natočte žehličku pre použitie
galvanickej hlavice.
Pomaly prechádzajte žehličkou
po dobu 5 sekúnd smerom
od úst a nosa k spodnej
časti ucha.
Opakujte 3-krát.

Čelo

Krok 1



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlavicou smerom zľava doprava po čele a opačne. Opakujte 3-krát.

Krok 2



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlavicou od obočia smerom k vlasom. Pomáhajte si druhou rukou, ktorou natiahnete pokožku čela, aby bola počas ošetrenia napnutjšia. Opakujte 3-krát.

Krok 3



Natočte žehličku pre použitie galvanickej hlavice. Pomaly prechádzajte žehličkou po dobu 5 sekúnd smerom od obočia k vlasom. Opakujte 3-krát.

Ústa

Krok 1



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlavicou po brade smerom zľava doprava a opačne. Opakujte 3-krát.

Krok 2



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlavicou od kútika úst smerom hore. Žehličku pritlačte, aby bola pokožka okolo úst napnutjšia, alebo si pomáhajte druhou rukou, ktorou natiahnete pokožku kútiku úst, aby bola počas ošetrenia napnutjšia. Opakujte 3-krát.

Krok 3



Natočte žehličku pre použitie galvanickej hlavice. Pomaly prechádzajte žehličkou po dobu 5 sekúnd smerom od úst a nosa k spodnej časti ucha. Opakujte 3-krát.

Čelo

Krok 1



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlaviceou smerom dole na krk až po kľúčnu kosť od prednej strany ucha. Opakujte 3-krát.

Krok 2



Jemne pohybujte mikroprúdovou hlaviceou po kľúčnej kosti smerom zo stredu do strán. Opakujte 3-krát.

Krok 3



Natočte žehličku pre použitie galvanickej hlavice. Pomaly prechádzajte žehličkou po dobu 5 sekúnd smerom dole od vrchnej časti krku. Opakujte 3-krát.

Údržba a čistenie žehličky

- Žehličku čistite navlhčenou handričkou alebo jemnou špongiou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, aby ste predišli poškodeniu žehličky.
- Žehličku skladujte na suchom a chladnom mieste mimo blízkeho dosahu zdrojov tepla a vlhkosti.
- Pre dlhšiu výdrž batérie, vyberte batériu von po každom použití žehličky.

Nepoužívajte ak:

- Trpíte akoukoľvek kožnou chorobou.
- Ak ste absolvovali operáciu očí alebo okolia očí za posledný rok a pol
- Ak máte menej ako 15 rokov.
- Ak trpíte kardiovaskulárnym ochorením alebo trpíte vysokým krvným tlakom.
- Ak ste tehotná alebo po pôrode.